

# EEN REDDINGSACTIE UITVOEREN

1



Reageert de patiënt?

2



Bel het noodnummer!

3



Haal AED.

4



Plaats AED op de grond.  
Open deksel.

5



Verwijder kleding.  
Ontbloot borst.

6



Bevestig pads.

7



Raak de patiënt niet aan!

8




Zo nodig dient AED  
automatisch shock toe.

9



Indien aanwezig,  
plaats reanimatieapparaat.

10

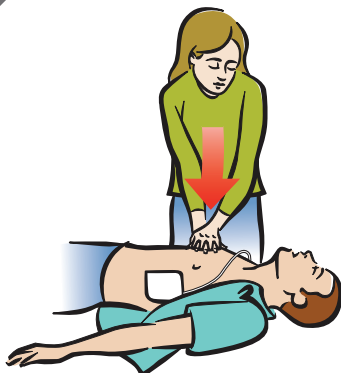

Volg instructies van AED.  
Geef compressies.

11



Als opgedragen,  
geef beademingen.

## Automatische AED



Cardiac Science en het Shielded Heart-logo zijn handelsmerken van Cardiac Science Corporation.  
Copyright © 2012, Alle rechten voorbehouden.  
N7 W22025 Johnson Drive, Waukesha, WI 53186 VS  
[www.cardiacscience.com](http://www.cardiacscience.com)



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover  
Duitsland



70-01092-82rB



# DÉROULEMENT D'UNE INTERVENTION

1



Le patient réagit-il ?

2




Appelez les services d'urgence !

3



Munissez-vous d'un DAE.

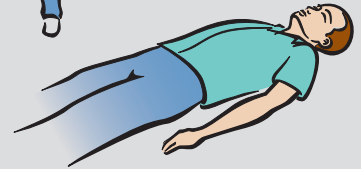

4



Posez le DAE sur le sol. Ouvrez le couvercle.

5



Enlevez les vêtements. Dénudez le thorax.

6



Placez les électrodes.

7



Ne touchez pas le patient.

8




Si nécessaire, le DAE administre automatiquement le choc.

9



Si un appareil de RCP est disponible, positionnez-le.

10

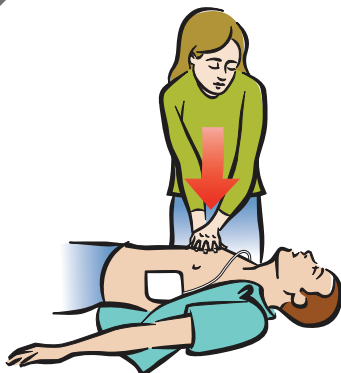

Suivez les invites du DAE. Administrez les compressions.

11



Si le système vous y invite, administrez les insufflations.

## DAE automatisé



Cardiac Science et le logo Shielded Heart sont des marques commerciales de Cardiac Science Corporation.  
Copyright © 2012. Tous droits réservés.  
N7 W22025 Johnson Drive, Waukesha, WI 53186, États-Unis  
[www.cardiacscience.com](http://www.cardiacscience.com)



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hanovre  
Allemagne



70-01092-82rB

